



Stehst Du auf Entfaltung?

Sichel- und Klumpfußtherapie

ANTI-VARUS für Kids

Gesundes Wachsen von Kinderfüßen

THANNER
SCHÄFTE
und mehr

Wir haben die speziellen Schuhe zur Sichel- und Klumpfußbehandlung für ein gesundes Wachsen der Kinderfüße!

Die ANTI-VARUS-Schuhe by THANNER

Der Klumpfuß

Der angeborene Klumpfuß stellt die zweithäufigste Skelettfehlbildung dar.

Arthrosen des unteren und oberen Sprunggelenkes können bereits in der zweiten oder dritten Lebensdekade bei Nichtbehandlung auftreten.

Eine konsequente konservative, ggf. auch operative Korrektur der Fehlstellung kann den Verlauf wesentlich begünstigen.

Therapie

Sofortbehandlung ist eine wichtige Voraussetzung zum Erreichen der Therapieziele.

Konservative Therapie

- Gipsbehandlung (Redression) mit Korrekturgipsen in den ersten zwei Lebenswochen, später wöchentlich bis in den dritten Lebensmonat.
- Krankengymnastik erfolgt auf Grundlage der Neurophysiologie (Vojta). Diese basiert auf einer Druckstimulation von propriozeptiven Punkten, um ein Muskelgleichgewicht herzustellen. Muskeldehnung, Kräftigung und Koordinationsschulung ergänzen die Redression.
- Orthopädische Maßnahmen werden, wie zum Beispiel Schienen, nach der Gipsbehandlung oder postoperativ eingesetzt. Innenschuhe, Drei-Backen-Einlagen und **ANTI-VARUS-Schuhe** kommen zum Einsatz.



Sonderanfertigungen


Sonderanfertigungen bezüglich Material- und Farbwechsel oder Modelländerung sind auf Wunsch jederzeit möglich.

**Die ANTI-VARUS-Schuhe by THANNER
basieren auf der bewährten 3-Punkt-Korrektur**



1. Der Rückfuß wird durch die feste Hinterkappe aufrecht gehalten
2. Auf der Außenseite wird durch die Verlängerung der Hinterkappe der Fuß als Gegenhalt zu der Korrektur im Vorfuß gehalten (Cuboideum)
3. Auf der Innenseite wird im Bereich des Großzehengrundgelenkes der Fuß durch eine entsprechende Verstärkung daran gehindert, in die Fehlstellung zurückzukehren.

Die Korrektur erfolgt mit einer Achsabweichung von mindestens 8°

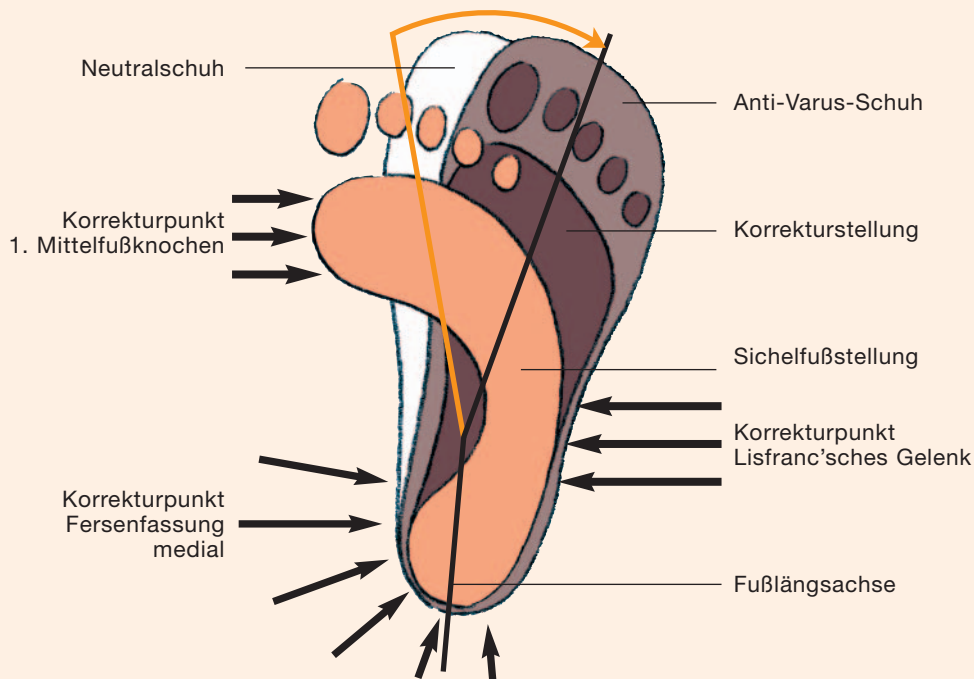

Indikation: Nach Beginn der Lauflernphase, bei Sichel- oder Klumpfüßen,
oder nach entsprechender Korrektur.

Rezeptierung: 1 Paar konfektionierte Korrektursicherungsschuhe ANTI-VARUS by THANNER

Hilfsmittelverzeichnis: Angemeldet unter der Produktgruppe 31.03.03.6000-6999



ATLANTIS
Größe 23-35
5.7000 Weite 4
dunkelblau/grau
Nubuk



MOSKITO
Größe 23-35
5.7014 Weite 4
dunkelblau/dunkelblau/rot
Nubuk/Nappa/Nubuk



PHOENIX
Größe 23-35
5.7016 Weite 4
sattelbraun/zigarre
Nappa/Nubuk

FUTURE
Größe 23-35
5.7005 Weite 4
dunkelblau/grau/gelb
Nubuk/Nubuk/Nappa



GALAXY
Größe 23-35
5.7006 Weite 4
grau/silber
Nubuk/Nylotex



MUSTANG

Größe 23-35
5.7015 Weite 4
camel
Fett nubuk



HURRICANE

Größe 23-35
5.7007 Weite 4
schwarz/eierschale
Nappa



ENTERPRISE

Größe 23-35
5.7004 Weite 4
schwarz/schwarz/weiß
Nappa/Nylotex/Nappa



JOLLY

Größe 23-35
5.7008 Weite 4
zigarre/dunkelblau/metallic
Nubuk/Nubuk/Nylotex



TEXAS

Größe 23-35
5.7017 Weite 4
schwarz/sahara/schwarz
PU-Spalt/Nubuk/Nappa

Alle Modelle haben als Futter Microlining und sind mit einem Laschen- und Knöchelpolster ausgestattet.

DAKOTA
Größe 23-35
5.7001 Weite 4
kastanie
Nature-Calf
Futter: Microlining



DAKOTA
Größe 23-35
5.7002 Weite 4
kastanie
Nature-Calf
Futter: Lammfell



JOKER
Größe 23-35
5.7011 Weite 4
dunkelblau/grau
Nappa/Nubuk



JOKER
Größe 23-35
5.7009 Weite 4
rot/schwarz
Nappa/Nubuk



JOKER
Größe 23-35
5.7010 Weite 4
kenia/antilope
Nappa/Velour

Reflektorstreifen



ENERGY

Größe 23-35
5.7003 Weite 4
schwarz/anthrazit/metallic
Nappa/Calbino/Nylotex



MONKEY

Größe 23-35
5.7013 Weite 4
schwarz/eierschale
Nappa



VICTORY

Größe 23-35
5.7018 Weite 4
grau/graphit/schwarz
Nubuk/Nappa/Nappa



LOLLIPOP

Größe 23-35
5.7012 Weite 4
bluespot/schwarz/schwarz
Filz/PU-Spalt/Nappa

**Alle Modelle haben als Futter
Microlining und sind mit einem
Laschen- und Knöchelpolster
ausgestattet.**

